


Tinkerine Face Shield V9.4: Manual

This face shield is used to protect the facial area from splashes, sprays, and spatters of bodily fluids. The current design is the result of continuous feedback from medical professionals. Not only is it balanced for functionality and comfort, it is also optimized for production speed and ease of assembly.

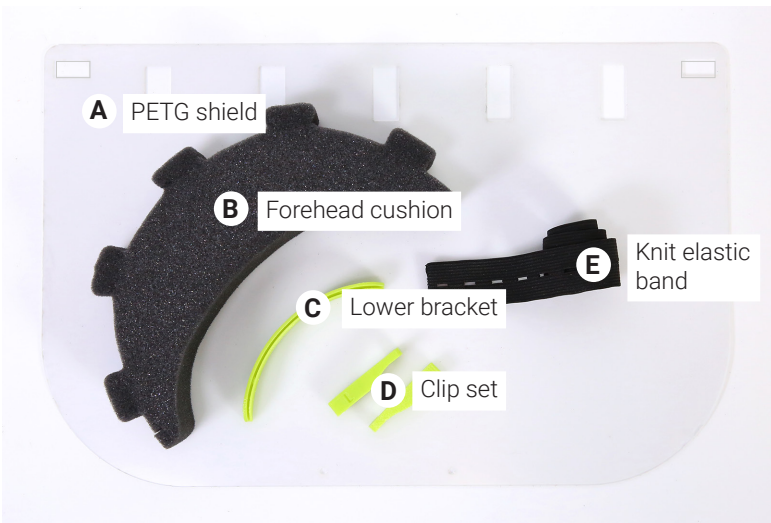

⚠ BEFORE ASSEMBLY

Make sure the protective films on both sides of the PETG shield are peeled off.

Step 1 - Attaching the clips + knit elastic band

- i. Take a clip and slide the tip into the top right corner hole on the PETG shield until the clip grabs onto the PETG shield.
- ii. Pop the centre of the clip into the PETG shield.
- iii. Repeat the above steps for the left corner hole.
- iv. Attach the knit elastic band onto the hooks on both sides. It's easier to hold the band perpendicular to the clip as shown in the picture.
- v. Check that the hooks are on the outside of the face shield.
- vi. Adjust the band for a snug but comfortable fit.

Step 2 - Attaching the cushion + lower bracket

- i. Take the forehead cushion and align its five extrusions to the five cutouts on the PETG shield.
- ii. Starting from one end, push all five foam extrusions through the cutouts.
- iii. Attach the lower bracket to the bottom of the PETG shield to help hold the shape.


Reusing the face shield

Only the PETG shield can be reused after sanitizing. Simply disassemble the shield in reverse order in which it was assembled. **Discard all other parts** as they cannot be reliably re-sterilized. Sanitize the PETG shield and reassemble the full face shield using fresh replacement parts.

Tinkerine Face shield is not sterile. Since the conditions and methods of assembly and use of Tinkerine Face Shield are beyond the manufacturer's control, the manufacturer expressly disclaim any and all liability arising from any assembly and use of Tinkerine Face Shield. NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING TINKERINE FACE SHIELD. The user should thoroughly test any application before use. By assembling and using Tinkerine Face Shield, the user does so at their own risk and waives all claims against the manufacturer. The user releases the manufacturer from all liability, whether due to foreseeable or unforeseeable risks, relating to Tinkerine Face Shield. The user is solely responsible for their assembly and use of the Tinkerine Face Shield. The manufacturer is not responsible for errors or omissions relating to Tinkerine Face Shield. The manufacturer does not provide any medical advice.

Tinkerine Écran Facial V9.4: Manuel

Cet écran facial est utilisé pour protéger le visage contre les éclaboussures, pulvérisations et projections de fluides corporels. Le modèle actuel est le résultat de rétroactions continues de professionnels de la santé. Il est non seulement fonctionnel et confortable, mais aussi optimisé pour la production et la simplicité de montage.

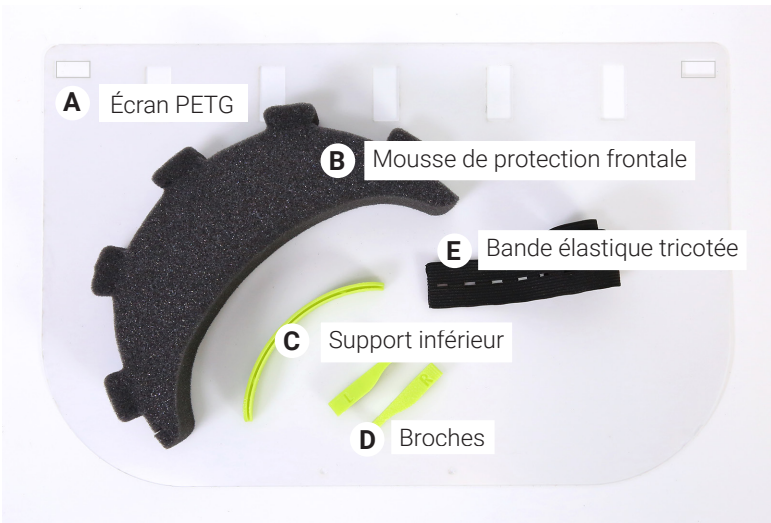

⚠ AVANT DE COMMENCER

Assurez-vous que les films de protection de l'écran PETG sont décollés des deux cotés

Étape 1 – Attacher les broches et la bande élastique tricotée

- i. Prendre une broche et glisse la pointe sur le trou du coin en haut à gauche de l'écran facial PETG, jusqu'à ce que la broche s'agrippe sur l'écran facial PETG.
- ii. Pousser le centre de la broche dans l'écran PETG.
- iii. Répéter les étapes précédentes pour le trou du coin gauche.
- iv. Attacher l'élastique tricoté sur les crochets des deux côtés. Il est plus facile de tenir la bande élastique perpendiculairement aux broches, comme illustré dans l'image ci-contre.
- v. Vérifier que les crochets sont à l'extérieur de l'écran facial.
- vi. Ajuster la bande élastique pour un maintien bien adapté et confortable.

Étape 2 - Attacher la mousse de protection et le support inférieur.

- i. Prendre la mousse de protection frontal et aligner ses cinq extrusions avec les cinq encoches de l'écran PETG.
- ii. En commençant par une extrémité, pousser les cinq extrusions en mousse dans les encoches.
- iii. Attacher le support inférieur au bas de l'écran PETG pour aider à garder une forme courbe.

Réutilisation de l'écran facial

Seul l'écran PETG peut être réutilisé après désinfection. Simplement désassembler l'écran dans l'ordre inverse de son montage. Jeter toutes les autres parties car elles ne peuvent pas être stérilisées de façon fiable. Désinfecter l'écran PETG et réassembler l'écran facial entièrement en utilisant de nouvelles pièces de rechange.

Traduit par Sabine Decamp, Facilitatrice de Technologie au Conseil Scolaire 40, New Westminster.

L'écran facial Tinkerine n'est pas stérile. Comme les conditions, méthodes de montage et utilisations de l'écran facial Tinkerine sont hors de contrôle du fabricant, le fabricant rejette expressément toute les responsabilités résultantes du montage et de l'utilisation de l'écran facial Tinkerine. AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE UTILISABLE À TOUTE FIN PARTICULIÈRE, AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE NI AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE CONCERNANT L'ÉCRAN FACIAL TINKERINE. L'utilisateur devrait tester minutieusement toute fonction avant utilisation. L'utilisateur assemble et utilise l'écran facial Tinkerine à ses propres risques et renonce à toute demande de réparation à l'encontre du fabricant. L'utilisateur libère le fabricant de toutes responsabilités, qu'elles soient dues à des risques prévisibles ou non, en relation avec l'écran facial Tinkerine. L'utilisateur est seul responsable de son montage et utilisation de l'écran facial Tinkerine. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs ou omissions concernant l'écran facial Tinkerine. Le fabricant ne fournit aucun conseil médical.